

# Dual-Cut DNSI-CNF

*High Performance Blades*

デュアルカット ブレード



# ユニークなデザイン・精密加工により 抜群の切れ味を実現する デュアルカット ブレード

デュアルカットブレードは、ストライカーのヘビードューティーサジタル骨鋸ハンドピースをより効果的に御使用頂けるようにデザインされました。


以下のシステムのサジタル骨鋸ハンドピースに適合します。

コードレスバッテリーパワー システム4

バッテリーオーソパワー システム2000

EHD エレクトリックオーソパワーシステム

## Specifications スケール 1/1

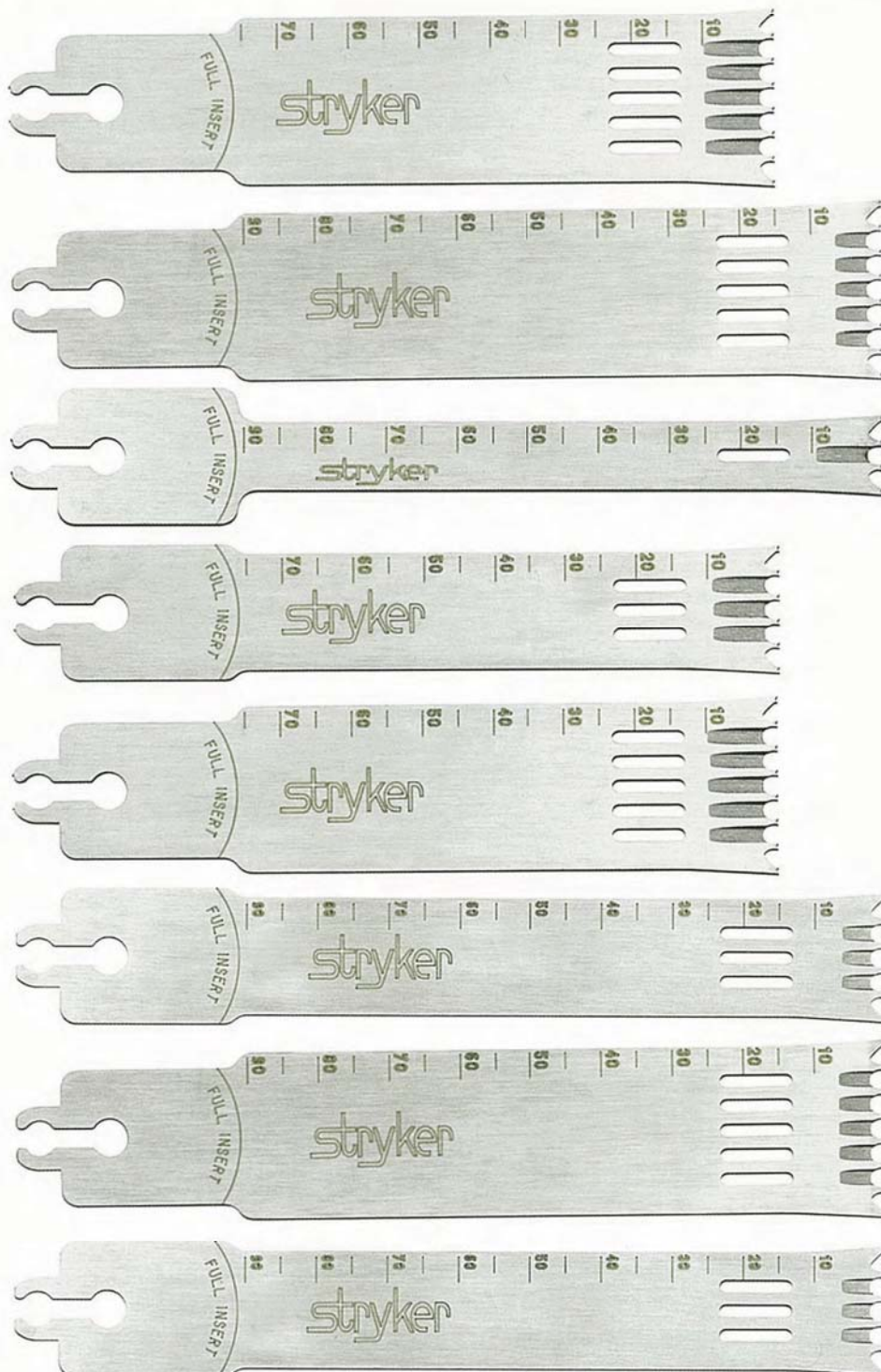

厚さ0.64mm

4125-064-075	
厚さ	0.64mm
幅	25mm
有効長	75mm

4125-089-090	
厚さ	0.89mm
幅	25mm
有効長	90mm

4111-089-090	
厚さ	0.89mm
幅	11mm
有効長	90mm

厚さ0.89mm

4118-089-075	
厚さ	0.89mm
幅	18mm
有効長	75mm

4125-089-075	
厚さ	0.89mm
幅	25mm
有効長	75mm

4118-089-090	
厚さ	0.89mm
幅	18mm
有効長	90mm



厚さ0.97mm

4125-097-090	
厚さ	0.97mm
幅	25mm
有効長	90mm

4118-097-090	
厚さ	0.97mm
幅	18mm
有効長	90mm

## 特長

- 1 先端で2方向に分かれた刃先が切除部位をしっかり捉えるので、正確で効率的な骨切除が可能です。
- 2 刃先の手前に設けた溝がボーンダストを後に押しやる役目を果たし、よりスムーズな骨切除が行なえます。
- 3 放熱効率の高いユニークな形状の窓により、骨切除中の温度上昇を抑えます。
- 4 各種の手術に対応できるように多彩なサイズを用意しました。

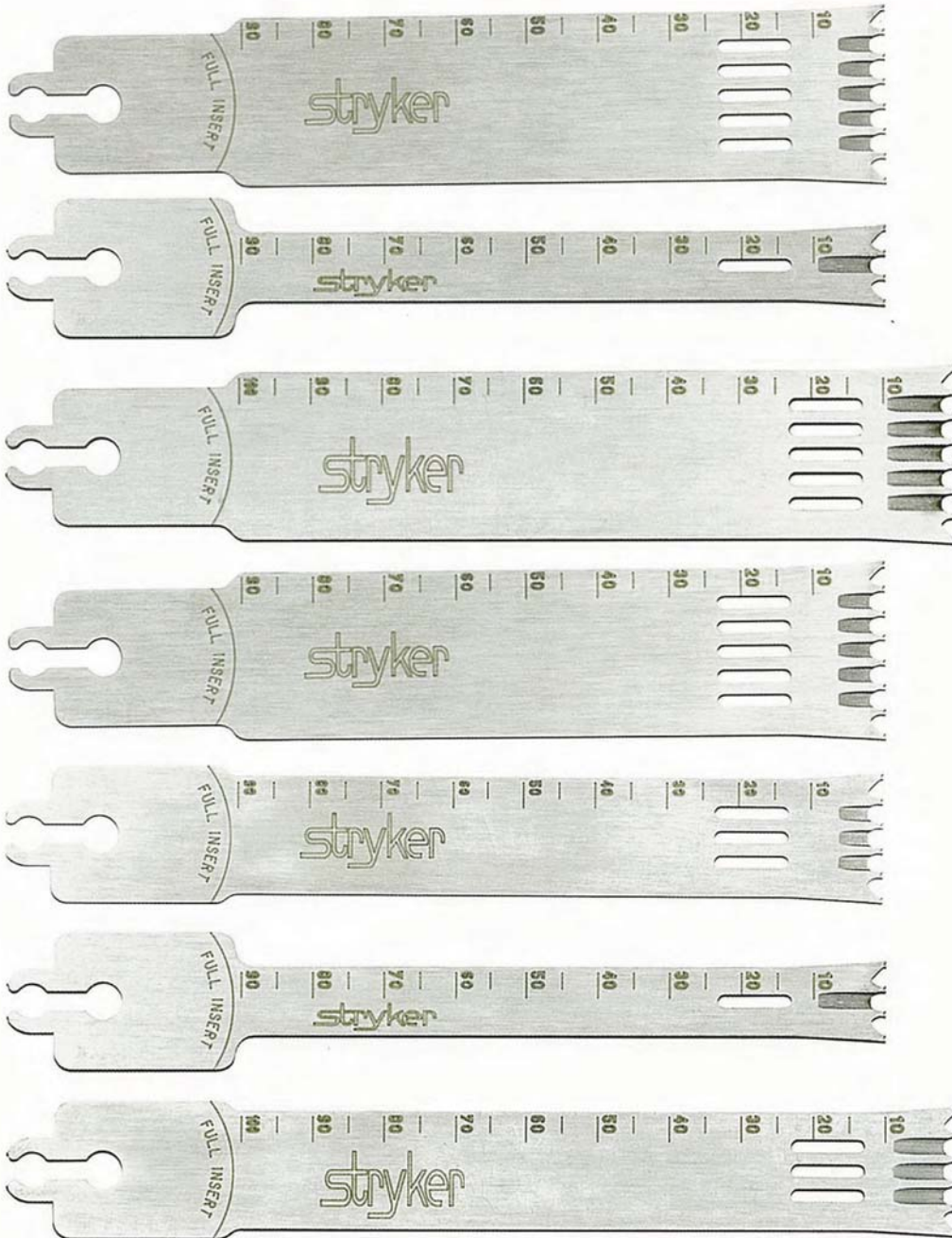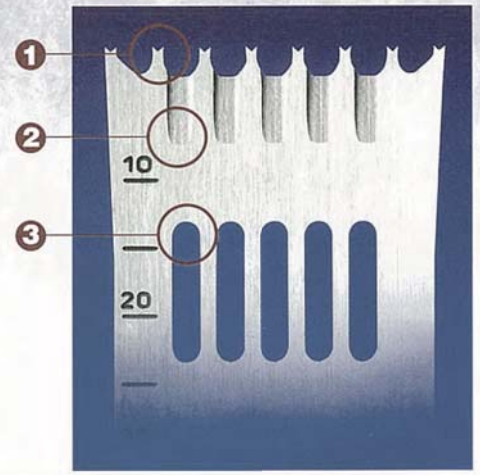

厚さ1.07mm

4125-107-090	厚さ	1.07mm
	幅	25mm
	有効長	90mm

4111-107-090	厚さ	1.07mm
	幅	11mm
	有効長	90mm

厚さ1.27mm

4125-127-100	厚さ	1.27mm
	幅	25mm
	有効長	100mm


4125-127-090	厚さ	1.27mm
	幅	25mm
	有効長	90mm

4118-127-090	厚さ	1.27mm
	幅	18mm
	有効長	90mm

4111-127-090	厚さ	1.27mm
	幅	11mm
	有効長	90mm

4118-127-100	厚さ	1.27mm
	幅	18mm
	有効長	100mm

Specifications スケール 1/1

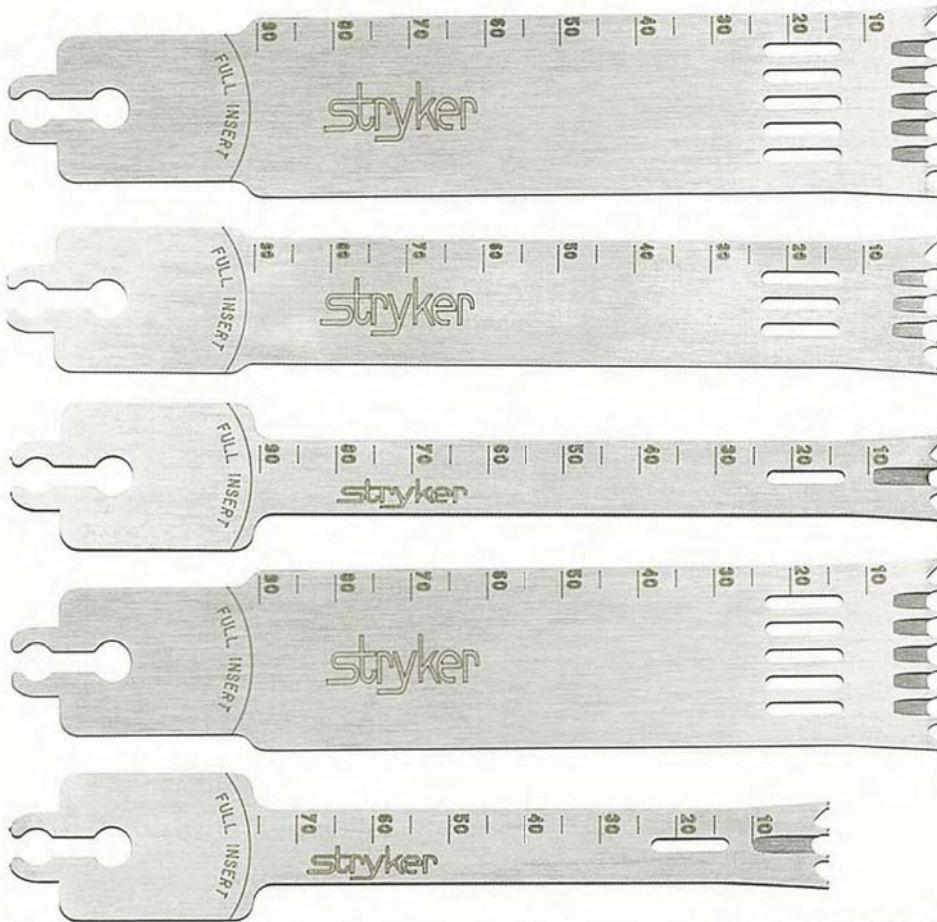

滅菌済/シングルユース

厚さ 1.35mm	4125-135-090	厚さ	1.35mm
		幅	25mm
		有効長	90mm
厚さ 1.47mm	4118-135-090	厚さ	1.35mm
		幅	18mm
		有効長	90mm
厚さ 1.47mm	4111-135-090	厚さ	1.35mm
		幅	11mm
		有効長	90mm
厚さ 1.47mm	4125-147-090	厚さ	1.47mm
		幅	25mm
		有効長	90mm
厚さ 1.47mm	4111-147-075	厚さ	1.47mm
		幅	11mm
		有効長	75mm

この印刷物はstrykerの製品を掲載しています。全てのstryker製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: IT1-19  
 KS/PH 3m 01/09

Copyright© 2001 Stryker  
 Printed in Japan

**日本stryker株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

[www.stryker.co.jp](http://www.stryker.co.jp)

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site  
[www.stryker.co.jp/medical.html](http://www.stryker.co.jp/medical.html)

製造販売業者

日本stryker株式会社

550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1