


Xia


Anterior System

エクシア アンテリアシステム

- ・デュアルステーブル
- ・アンテリア用モノブロックコネクター
- ・バットレススレッド

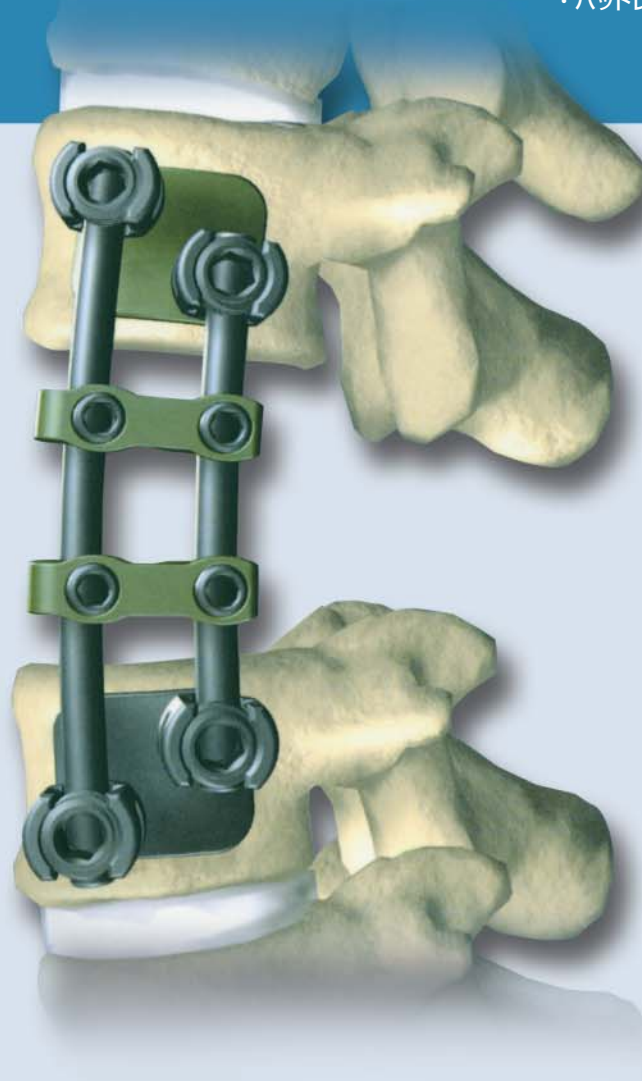



Xia Anterior

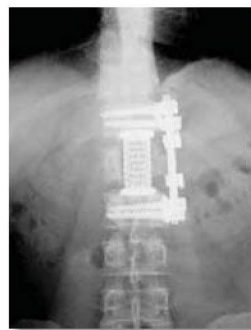

デュアルステーブル


椎体の形状にあわせデザインされたアナトミカルデザインのデュアルステーブルは、椎体スクリーユにかかる負荷の効果的な分散と挿入後のプロファイルの低減に期待できます。

デュアルステーブルのサイズはS、M、Lの3種類、また頭側用、尾側用があります。頭側用、尾側用のステーブルを正しく使用することで、挿入されたコンストラクトは台形を形作り、術後の脊柱をより安定させます。

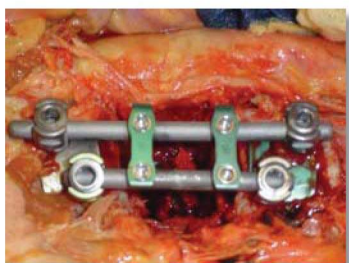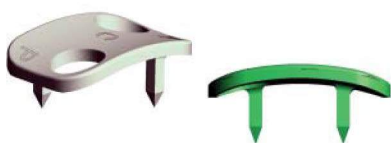


アンテリア用モノブロックコネクタ

アンテリア用に新たにデザインされたモノブロックコネクタの大きな特徴は、セットスクリーユの角度を10°に設定したところです。これにより、前方手術のように深い位置での作業でも容易にセットスクリーユを締め付けモノブロックコネクタの固定ができるようになりました。この改良はモノブロックコネクタの装着の作業を大幅に簡略化しました。またXiaスパインシステムでも評価されているロープロファイルなコネクタは、術後の患部の不快感や周囲組織の損傷の可能性を低減します。

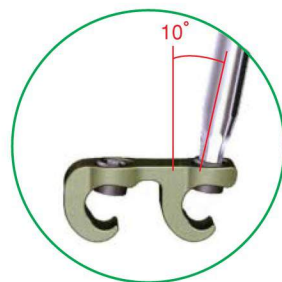

バットレススレッド

Xiaスパインシステムで定評のあるバットレススレッドのクロージングスクリーユの特性は、通常のスレッドデザインよりも挿入時の角度を多く許容しながらクロススレッドの可能性を低減します。また挿入後のスプレディングフォースが少ないため高いコンストラクトの強度が得られます。これらの特性は前方手術のような患部の深く、インプラントの操作が困難な状況で特に際立ちます。

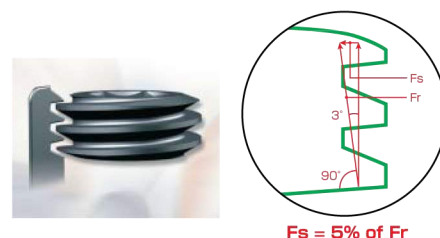

Implant

■ モノアキシアルスクリーユ LP

カタログ番号	全長
03820535	5.5mm×35mm
03820540	5.5mm×40mm
03820545	5.5mm×45mm
03820550	5.5mm×50mm
03820635	6.5mm×35mm
03820640	6.5mm×40mm
03820645	6.5mm×45mm
03820650	6.5mm×50mm
03820655	6.5mm×55mm
03820735	7.5mm×35mm
03820740	7.5mm×40mm
03820745	7.5mm×45mm
03820750	7.5mm×50mm
03820755	7.5mm×55mm



■ ユニオンロッド*

カタログ番号	全長
665050	6mm×50mm
665060	6mm×60mm
665070	6mm×70mm
665080	6mm×80mm
665090	6mm×90mm
665100	6mm×100mm
665110	6mm×110mm



■ デュアルステーブル

カタログ番号	サイズ	色
03820110	スモール 尾側	灰
03820111	スモール 頭側	青緑
03820112	ミディアム 尾側	灰
03820113	ミディアム 頭側	青緑
03820114	ラージ 尾側	灰
03820115	ラージ 頭側	青緑



■ モノブロックコネクタ

カタログ番号	サイズ
03821015	15mm
03821016	16mm
03821017	17mm
03821018	18mm
03821019	19mm
03821020	20mm



カタログ番号	品名
03820104	椎体ステーブル

カタログ番号	品名
03820100	ワッシャー

カタログ番号	品名
03756230	クロージングスクリーユ

販売名: xia スパインシステム
医療用具承認番号: 21500BZY00108000

*販売名: ディアパゾン
*医療用具承認番号: 21300BZY00231000

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

◎マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site
www.stryker.co.jp/medical.html

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1