

SONOPET Ultrasonic Surgical Aspirator

NEW

超音波手術器ソノペット M105チップセット (PED用)

M105チップセット
(5450-800-422)

チップ先端部



SONOPET

MSLハンドピースと接続して使用可能なPED用チップセット

◆ M105チップセットスペック

カタログ番号	名称	先端幅	全長	モード	吸引	カバー外径
5450-800-422	M105	1.9mm	296mm	LT振動	あり	3.8mm

MSLハンドピース
(5450-830-000)

SONOPET MSL ハンドピース

LT 振動 (Longitudinal - Torsional)


縦振動とねじれ振動の組み合わせにより、より効果的に骨を切削できます。

高い安全性

非回転の往復運動 (LT 振動) により、従来のドリルで懸念される「巻き込み」や「キッキング」が無く、安心して骨を切削できます。

1台3役

1本のハンドピースで破碎、イリゲーション(送水)、サクション(吸水)を同時に行います。

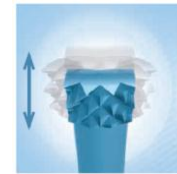

縦振動



ねじれ振動

医療機器承認番号 販売名

22500BZX00508000 ソノペットUST-2001 アルファ

関連製品 MED用チップセット

◆ MED用チップセットスペック



M101, M102タイプ



M103タイプ

カタログ番号	名称	先端幅	全長	モード	吸引	備考
5450-800-412	M101	3.0mm	147mm	LT振動	あり	
5450-800-413	M102	1.9mm	147mm	LT振動	あり	
5450-800-414	M103	1.9mm	147mm	LT振動	あり	押し切りタイプ

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

◎マークの付いた製品名は、ストライカー・グループの登録商標です。

Literature Number: NE1-14
EA/SK 0m 11/14

Copyright © 2014 Stryker
Printed in Japan

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site
www.stryker.com.jp/mp2/

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1