

ReUnion Fracture system

リユニオン フラクチャーシステム

- ▶ Simplicity
- ▶ ReUnion
- ▶ Variation



ReUnion Fracture system

ReUnion Fracture Systemは、大・小結節の骨癒合に最適な近位デザインと簡便且つ再現性の高い手術器械を有する人工肩骨頭用のシステムです。

Simplicity

簡便で再現性の高い器械

- Expandable trialの採用
 - ➡ 髓外アライメントガイドが不要
 - ➡ 簡単に髓腔に固定
- トライアルとインプラント共通のデプスマーカー
 - ➡ 最適な高さ・後捻にインプラント設置が可能

髓外アライメントガイドを使用することなく、付属のハンドルを半回転させることによってステムトライアルの遠位部が拡張し髓腔内に固定することができます。この簡便なExpandable Trialを採用することによって手術時間の短縮や操作性の向上が期待できます。

また、Expandable Trialにはインプラントと共通の3本のデプスマーカーがあり、適切な高さへの挿入が可能となっています。さらに、バージョンロッドも取り付けることができるため、最適な後捻設置も可能となります。

このExpandable Trial一つでインプラント設置高さ・後捻の決定、そして試整復を行うことができます。



ReUnion

大・小結節の骨癒合に最適なデザイン

- ボーングラフトウィンドウと縫合用のホール
- ステム近位部の長期臨床成績を有する PureFix HA
- 豊富なバリエーション (1mmピッチのサイズ+3種類のロングステム)
- Low Profile



Variation

Humeral Head

●デュアルラディウスデザイン

⇒ 骨頭周辺の曲率を小さくし、軟部組織へのインピンジメントを軽減。より大きなROM獲得します。

●豊富なバリエーション



⇒ スタンダードデザインとデュアルオフセット (4mm/8mm)

⇒ 独立した骨頭厚と径が選択可能です。
軟部組織バランスの最適化と解剖学的な変化に対応可能です。

●全てのサイズでソーラーグレンノイド

コンポーネントとの互換性

⇒ Total Shoulder Arthroplastyへの置換術がグレンノイド置換のみで可能

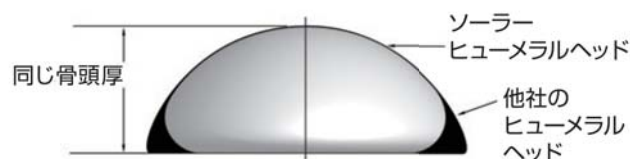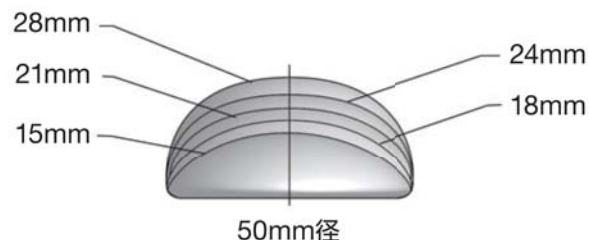

■カタログ番号一覧



リユニオン ヒューメラルステム*1

カタログ番号	サイズ
R5351-4507	#7
R5351-4508	#8
R5351-4509	#9
R5351-4510	#10
R5351-4511	#11
R5351-4512	#12
R5351-4513	#13
R5351-4514	#14
R5351-4515	#15
R5351-4608	#8 Long
R5351-4610	#10 Long
R5351-4612	#12 Long

は、オプションサイズになります。



ヒューメラルヘッドコンポーネント*2

カタログ番号	外径	厚さ
OR-5350-4012	40mm	12mm
OR-5350-4015		15mm
OR-5350-4018		18mm
OR-5350-4021		21mm
OR-5350-4512	45mm	12mm
OR-5350-4515		15mm
OR-5350-4518		18mm
OR-5350-4521		21mm
OR-5350-4524	50mm	24mm
OR-5350-5015		15mm
OR-5350-5018		18mm
OR-5350-5021		21mm
OR-5350-5024		24mm
OR-5350-5028	55mm	28mm
OR-5350-5518		18mm
OR-5350-5521		21mm
OR-5350-5524		24mm
OR-5350-5528	55mm	28mm
OR-5350-5534		34mm

オフセットヘッド*2

カタログ番号	外径	厚さ
5352-4015	40mm	15mm
5352-4018		18mm
5352-4515	45mm	15mm
5352-4518		18mm
5352-4521		21mm
5352-5021	50mm	21mm

医療機器承認番号 販売名
 *1 22300BZX00278000 リユニオン ショルダーシステム
 *2 21700BZY00477000 ソーラー トータルショルダーシステム

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明点がありましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: OJ1-21
NH/YG/SS 0.3m 1/17

Copyright © 2017 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/