

Stryker Prime X™

Big wheel® / 第5車輪モデル 救急処置台ストレッチャーベッド

多機能 機動力
そして、イメージクオリティ




Stryker Prime X™

先進の機動性と安全性、使いやすさとClearViewテクノロジー

Prime Xは救急初療室での外傷処置やX線撮影に優れた幅広77cmの二重寝台を装備したストレッチャーです。ストレッチャー、処置台、ベッドの機能を併せ持つPrimeに対して、外傷処置と手技中の速やかな撮影、それに続く院内搬送に特化したモデルです。

一秒を争うタイミングの治療をサポートするPrime Xと、幅広い症例や部署に合うPrimeは、寝台以外の作りは同等で混在してご使用頂いても、スタッフが混乱せずに幅広い症例に備えることができます。

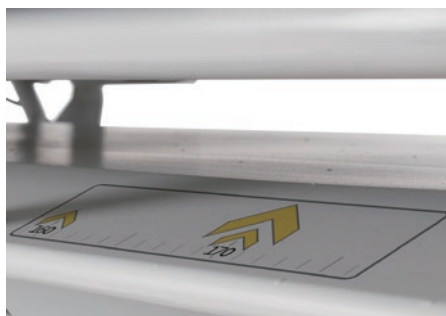

台の水平部の幅が17インチなので、患者の正中に合せた横位置合わせが盲目的にできます。



360度の全方向から、どの位置にもカセットを設置できます。目盛により縦位置の調整も簡単です。



背板と下肢寝台をあげ、処置中の汚れも隅々まで清掃できます。(ベッド洗浄器にも対応)

ClearView™ テクノロジー

ABS樹脂外殻に構造発泡剤を充填した構造で、撮影台に近いイメージクオリティです。患者寝台～トレイ距離は7.5cmで操作性と撮影への影響のバランスを取っています。

Lift Assist™ 背板

増力機構により、患者様から目を離さずにレバー操作で背上げができます。カセットを壊す心配もありません。

内蔵式スケール(オプション)

患者様を乗せたまま正確な体重が計測できます。自動洗浄や手動クリーニングに耐えられる密閉式です。


Gridaway™ サイドレール

昇降時に挟みこみにくく、ベッド移動時の隙間ゼロで、患者安全を優先した設計です。



先進の移動性能

収納式の第5車輪により、思い通りの旋回やスピード調整ができます。Big Wheel® は始動時の力を50%、カーブでの力を60%軽減します。

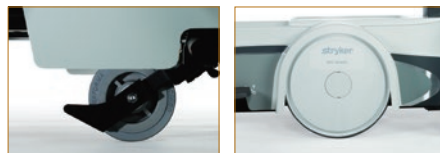


ブレーキ・ステア ペダル

金属ギアの旋回固定と、車輪側面圧迫の回転固定の強力なブレーキ機構です。ペダルは四方にあり、患者様から目を離さずすぐに操作できます。

トラウマ症例に適した「安全で使いやすい」Prime X™ ストレッチャー

患者様とスタッフの安全を第一に考えたPrimeシリーズに、外傷症例に適した幅広寝台と撮影台と同等の透過寝台を備えた Prime X。優れた基本性能のPrimeと組合せて、先進的な急性期病院の治療効率と安全向上に貢献いたします。

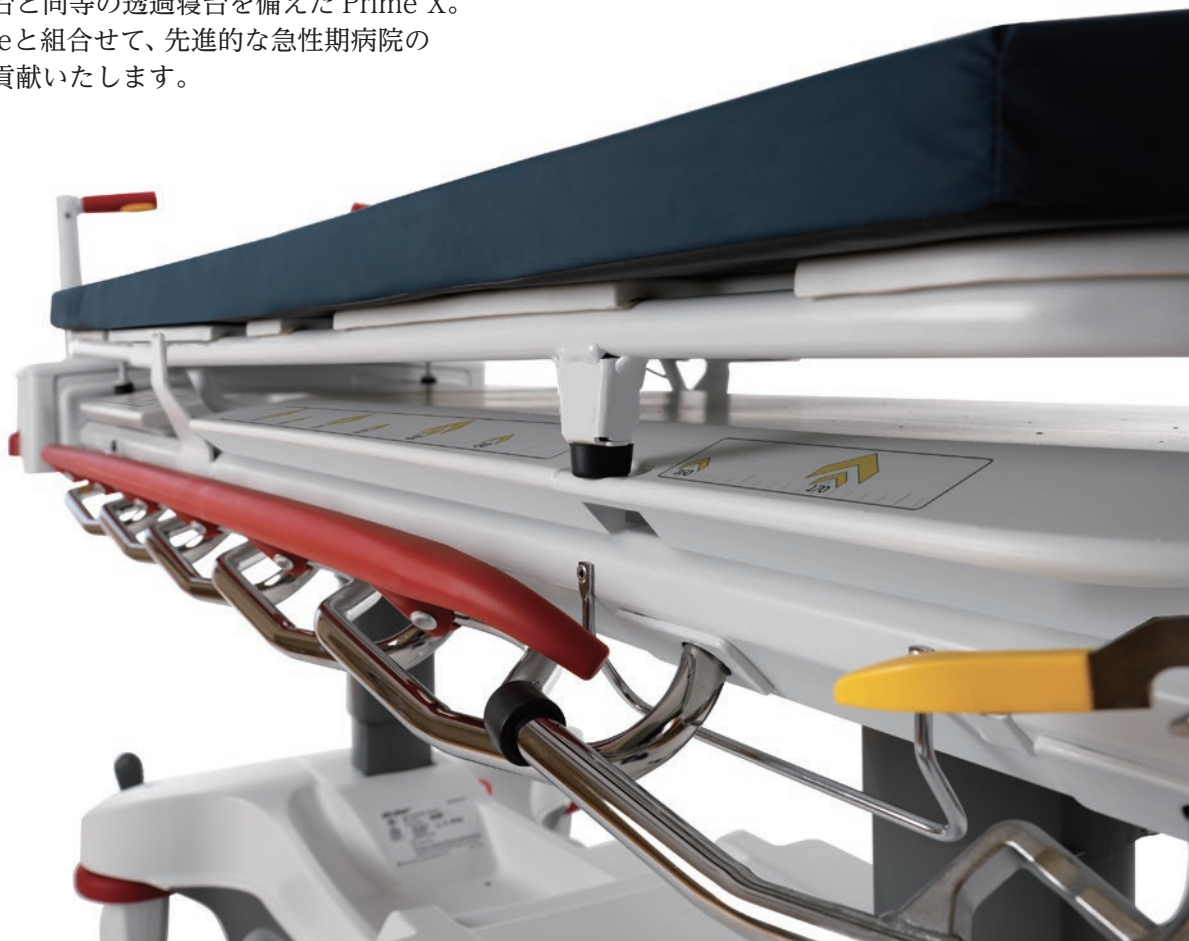


標準機能



酸素ボンベホルダー



縦型酸素ボンベホルダー

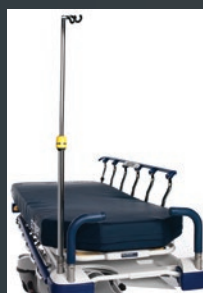

一体型 2 段式
IV ポール
頭尾側
(写真 頭側)



多用途トレイ
スライディング
ボード

オプション



拡張型トレイ*



フットボードチャートホルダー



四役フットボード*



除細動器用トレイ*

* 耐荷重 13.6kg

救急処置台マルチERベッドPrime Xシリーズ (X線撮影対応)

1105-000-000X プライム X ストレッチャー 1105X 76cm 幅寝台 X 線撮影機能付き

1115-000-000X プライム X ビッグウィールストレッチャー 1115X 76cm 幅寝台 X 線撮影機能付き

標準装備

- ABS樹脂製トレイ付ベースカバー
- 寝台下酸素ボンベホルダー
- 縦型酸素ボンベホルダー (1115-130-000)
- スライディングボード 76cm 用 三折式 (1105-045-310)
- 4輪同時ブレーキ
- ハイ・ローペダル (両サイド、脚部3ヶ所)
- ブレーキ・ステアペダル (四方)
- Glideaway™ サイドレール
- IVポール取付穴 (4ヶ所)
- 空気圧バックレスト (背上げ部)
- ポップアップ移動用ハンドル
- 一体型2段式IVポール (頭尾側)
- 着脱型IVポール 737/747/ プライム用 (1本、0390-025-010)
- 自動洗浄器対応

仕様

| 仕様 | | 1105-000-000X | 1115-000-000X |
|----------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 全長 | | 216 cm | 216 cm |
| 全幅 | サイドレール上昇時 | 96.5 cm | 96.5 cm |
| | サイドレール下降時 | 77.5 cm | 77.5 cm |
| 本体重量 (付属品含まず) | | 140.3 kg | 156.0 kg |
| 耐荷重 | | 318 kg | 318 kg |
| 昇降レンジ (寝台天面高 マットレス厚含まず) | 最高位 | 92.7 cm | 92.7 cm |
| | 最低位 | 59.1 cm | 59.1 cm |
| 寝台上げ角度 背部 | | 0° - 90° | 0° - 90° |
| | トレンデレンブルグ角度 (正逆) | ± 17° | ± 17° |
| 寝台寸法 | | 76 × 191 cm | 76 × 191 cm |
| サイドレール寸法 | | 36 × 147 cm | 36 × 147 cm |
| キャスト径 | | 20 cm | 20 cm |

オプション

| カタログ番号 | 製品名 |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1070-060-360* | 体重計システム プライム 30 インチ用 |
| 0390-025-010 | 着脱型IVポール 737/747/ プライム用 |
| 1703-034-301 | ウルトラコンフォート SE マットレス 193 × 76 × 7.6cm |
| 1704-034-301 | ウルトラコンフォート SE マットレス 193 × 76 × 10cm |
| 1105-045-200** | 除細動器用トレイ |
| 1105-045-400** | 四役フットボード 機器トレイ / 記録台 / 延長ボード |
| 1105-045-500** | フットボード チャートホルダー |
| 1105-045-310 | スライディングボード 76cm 用 三折式 |
| 1105-045-700 | 拡張型トレイ プライム用 |
| 1105-045-800*** | 拡張型トレイホルダー 1105-045-700 用 |
| 1115-130-000 | 縦型酸素ボンベホルダー ストレッチャー用 |
| 0785-155-000 | IV キャディ ストレッチャー用 要取付作業 |

*計量法の検定なし。当製品で測定した計測値は取引・証明に使用できません。

**装着すると体重計表示が見えなくなります。

***装着すると一体型IVポールが立てられなくなります。

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: BD1-30

YN/MI 3m 11/17

Copyright © 2017 Stryker

Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/